

///

R&E

SUPER



R&E

NH NARDI &
HERRERO



✓ SUPER R&E

MODELO

A

UNIDAD DENTAL SUPER INSULAR A
SILLÓN M5 VUELTA CERO
LÁMPARA DENTAL LED-FSA



///
* LA IMAGEN INCLUYE
OPCIONALES

/// EQUIPO DENTAL R&E MODELO SUPER A

/// ELEMENTOS COMUNES A LOS DOS MODELOS

- El brazo que soporta a la Mesa de Trabajo con los instrumentos, tiene sus articulaciones montadas sobre crapodinas (ver fig. 1) que le otorgan suave y liviano desplazamientos (exclusivo de Nardi y Herrero).
- Jeringa triple y dos salidas neumáticas con acople Borden (una con agua para refrigeración). Ofrecemos opcional una Lámpara Polimerizadora a Lucerna LED, otra salida neumática y un cavitador ultrasónico (pueden ser cinco los instrumentos).
- Mediante una membrana digital se ejecutan los movimientos del sillón y Vuelta a Cero del mismo, lavado de la salivadera (temporizado), llena vaso, encendido-apagado del negatoscopio (con iluminación a LED) y Lámpara Dental LED-FSA.
- Salivadera de cerámica. Bandeja de acero inoxidable para la mesa de trabajo.
- En el área de asistente, además del Aspirador de Saliva neumático con soporte automático y filtro en el porta cánula (más de 60 mm de Hg de aspiración) ofrecemos tres instrumentos opcionales: Aspirador de Alto Caudal, Aspirador de Sangre (más de 80 mm de Hg) y Jeringa Triple. Se pueden instalar dos de estos tres (ver fig 2).

✓ SUPER R&E

MODELO

R

UNIDAD DENTAL SUPER INSULAR R
SILLÓN M5 VUELTA CERO
LÁMPARA DENTAL LED-FSA

///
* LA IMAGEN INCLUYE
OPCIONALES



/// EQUIPO DENTAL R&E MODELO SUPER R

FIG. 1

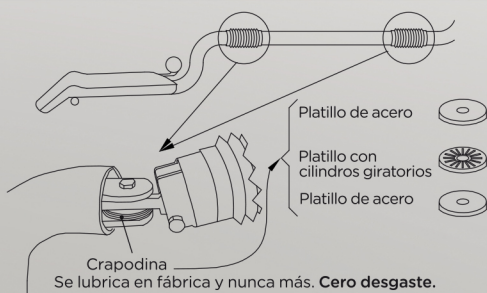


FIG. 2



LÁMPARA DENTAL LED-FSA



Intensidad lumínica variable 7.000 - 41.000 Lux mediante un sensor que tiene también la función encendido-apagado de la Lámpara. La superposición de más de 200 superficies reflexivas produce un excelente efecto cialítico.

OPCIONALES PARA LA LÍNEA SUPER R&E

- Micromotor eléctrico en reemplazo de la salida neumática para micromotor neumático (FB004A).
- Agua refrigeración Micromotor (TU109A).
- Tanque para agua (1.000 cm³) (TU108A).
- Jeringa Triple para asistente (JE013A).
- Aspirador de Alto Caudal (EA024A).
- Aspirador de Sangre (EA024D).
- Lámpara Dental Polaris en reemplazo de Lámpara

LED-FSA (FB1006), espejo retrovisor y filtro antipolimerización (AE084C) y Lámpara de Blanqueamiento G-Comm para Polaris (AE084B).

- Brazo soporte del monitor (LB026D).
- Monitor HD wide 20" HDMI (MON20LH).
- Tapizado del sillón Artesanal con costura en reemplazo del liso sin costura (SI044A).
- Apoya brazo derecho rebatible extraíble (SI083A).

Super R:


- Lámpara Polimerizadora Lucerna LED (FB002F).
- Otra salida neumática con refrigeración (TU116A)
- Cavidador Ultrasónico (UDS-N1) o (UDS-N2) (lumínico) en ambos sumar TU116A

Super A:

- Lámpara Polimerizadora Lucerna LED (FB002C).
- Otra salida neumática con refrigeración (TU109C)
- Cavidador Ultrasónico (UDS-N1) o (UDS-N2) lumínico) en ambos sumar TU109C.



SILLÓN M5 VUELTA A CERO

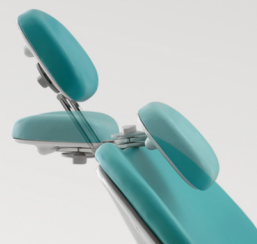

- Los movimientos del Respaldo y Asiento se realizan con Actuadores Lineales (a tornillo) de bajo voltaje.
- Elevan pacientes de más de 250 Kg. de peso con gran amplitud de movimiento. Asiento descendido 440 mm. del piso, ascendido 800 mm. El 100% de la estructura de este sillón está construida en acero y fundición de aluminio.
- Equipado con un programa de Vuelta a Cero y parada de emergencia.
- El Comando de Pie no está fijo al Sillón, se lo puede ubicar libremente; está unificado con el comando de la Unidad Dental.
- Su base de acero está revestida en Epoxi Termoconvertible (horneado a 180°C) para evitar la oxidación.

- El respaldo del Sillón posee una escotadura para que pacientes muy bajos puedan doblar el cuello hacia atrás para permitir visión directa en arcada superior.
- La doble articulación del apoya cabeza permite adaptarse a todo biotipo de pacientes, especialmente útil en gibosos. Inmoviliza la cabeza confortablemente.
- El apoyacabeza es elongable, autoajustable y con registro, es reversible para atención de pacientes en sillón de ruedas.
- Tapizado exento de costura. Opcional Tapizado Artesanal con costura.
- El Apoya Brazo Derecho (opcional) es rebatible - extraíble mediante rápida operación.
- Los apoya brazos están contruidos en fundición de aluminio.



COLORES DE LOS TAPIZADOS



DISTRIBUIDORES

NARDI & HERRERO

Fábrica: Colón 2899
Rosario S2001RAC - Santa Fe - Argentina
Telefax: +54 341 4810645 / 4815522
E-mail: commercial@nardiherrero.com.ar

WWW.NARDIHERRERO.COM.AR

Diferencias en los colores se deben a la impresión de este catálogo.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES.

NR003