



LINEA R&E



NH NARDI &
HERRERO



LINEA R&E

MODELO

A


UNIDAD DENTAL INSULAR
SILLÓN M5
LÁMPARA DENTAL R&E



///
* LA IMAGEN INCLUYE OPCIONALES



Sillón M5 ///

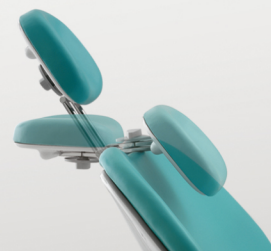

● Ascenso-descenso de la mesa balanceado con regulación, registro de nivelación y freno.

● La doble articulación del apoya cabeza permite adaptarse a todo biotipo de pacientes, especialmente útil en gibosos, etc. Con ajuste del movimiento de elongación. Es reversible para atención de pacientes en sillón de ruedas.

/// ELEMENTOS COMUNES A LOS DOS MODELOS

- Actuadores lineales (a tornillo) de bajo voltaje. Elevan pacientes de más de 250 Kg. con gran amplitud de movimiento. Asiento descendido 440 mm. del piso; ascendido 800 mm. La escotadura superior del respaldo permite descender el apoya cabeza para posicionar pacientes de baja estatura. Tapizados exentos de costura. OPCIONAL: Tapizado artesanal con costura. Lámpara dental microica de luz fría: más de 25.000 lux en máxima y aproximadamente 14.000 lux en mínima, el policarbonato del frente es desmontable por simple tracción y su manija desmontable y autoclavable a 135°C. Los picos llenavaso y lavado de salivadera son extraíbles y autoclavables. La parte superior de la mesa de trabajo está construida en chapa de acero electrozincada (pesa más de 1,4 Kg.) pintada en epoxi termoconvertible de alta resistencia (igual que las cocinas hogareñas). No necesita bandeja de acero inoxidable (igual la ofrecemos opcional).

LINEA R&E

MODELO

C

UNIDAD DENTAL INSULAR ECO
SILLÓN M6
LÁMPARA DENTAL R&E



///
* LA IMAGEN INCLUYE OPCIONALES



● La altura de la mesa se regula mediante una simple y rápida operación sin moverse el profesional de su posición de trabajo.


Sillón M6 ///



● El apoya cabeza es articulado, elongable (con ajustes) y extraíble. OPCIONAL: Reemplazo del cabezal por uno de doble articulación (M5) (SI044Q). El apoya brazo izquierdo es opcional (SI084B).

///
○ Instrumental estándar:

Jeringa triple y dos salidas neumáticas con acople Borden (una con agua para refrigeración) ofrecemos opcional una Lámpara polimerizadora Lucerna Led, otra salida neumática y un Cavitador ultrasónico (pueden ser cinco los instrumentos). Micromotor eléctrico opcional en lugar de una salida neumática. Aspirador de saliva neumático con soporte automático y filtro en el porta cánula. Más de 60 mm. Hg de aspiración. En el área del asistente además del Aspirador de Saliva ofrecemos tres instrumentos opcionales: Aspirador de Alto Caudal, Aspirador de Sangre (mínimo 80 mm. Hg) y Jeringa Triple para Asistente. Se pueden instalar dos instrumentos de estos tres.

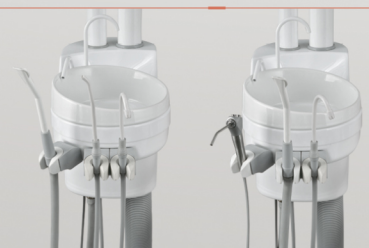

OPCIONALES PARA LA LÍNEA R&E

- Otra salida neumática con agua para refrigeración (TU109C) y/o Cavitador ultrasónico (UDS-N1) o (UDS-N2 lumínico) en ambos sumar TU109C.
- Salivadera de cerámica (SS050E).
- Bandeja de acero inoxidable (TR018A).
- Lámpara polimerizadora Lucerna LED (FB002C).
- Aspirador de alto caudal (EA024A).
- Aspirador de sangre (EA024D).
- Jeringa triple para asistente (JE013A).
- Micromotor eléctrico en reemplazo de la salida neumática

- para micromotor neumático (FB004A).
- Agua refrigeración Micromotor (TU109A).
- Tanque para agua (TU108A).
- Lámpara dental LED-FSA (7.000 - 41.000 Lux) en reemplazo de la Lámpara dental R&E (FB1005D). Además a éste se le puede agregar un soporte para el Monitor (LB026D) (ver imagen de tapa e interno modelo A).
- Monitor HD wide 20" HDMI (MON20LH).
- Tapizado de los sillones Artesanal con costura en reemplazo del liso sin costura (SI1044A).

OPCIONAL PARA UNIDAD DENTAL INSULAR E INSULAR ECO (ED1044A)

Doble comando para Sillón (M5 o M6), vuelta a cero para el mismo y negatoscopio iluminado por LED. Mediante una membrana digital ubicada en la mesa de trabajo se ejecutan los movimientos del sillón y encendido-apagado del negatoscopio.



OPCIONALES PARA SILLONES M6

Apoya brazo izquierdo (SI084B)(aluminio fundido) Entonces se puede optar por un apoya brazo derecho (SI083A). Reemplazo del cabezal por uno de doble articulación (M5) (SI044Q).



OPCIONAL PARA SILLONES M5

Apoya brazo derecho rebatible-extraíble (SI083A) construido en fundición de aluminio.

COLORES DE LOS TAPIZADOS



DISTRIBUIDORES

NARDI & HERRERO

Fábrica: Colón 2899
Rosario S2001RAC - Santa Fe - Argentina
Telefax: +54 341 4810645 / 4815522
E-mail: commercial@nardiherrero.com.ar

WWW.NARDIHERRERO.COM.AR

Diferencias en los colores se deben a la impresión de este catálogo.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES.

NR003